



Lits à eau multisensoriels pour la thérapie  
et la relaxation







## Table des matières

Akva Sense®	4
Fabrication au Danemark	7
Akva Sound®	8
Accessoires	9
Socles et solutions de rangement	12
Matières et couleurs	14





## Akva Sense®

AKVA Sense® est un lit à eau multisensoriel qui combine des sensations haptiques et auditives pour créer une expérience de relaxation profonde. Le lit sensoriel utilise les qualités apaisantes de l'eau et crée ainsi un environnement réactif et embrassant. Les sensations de confort et de chaleur peuvent être complétées par la musique du système audio intégré.

Le secret derrière Akva Sound® est l'utilisation de l'excellente capacité de l'eau à transmettre le son. Alors que l'utilisateur se détend dans le lit, les ondes sonores sont transformées en vibrations d'eau stimulantes. Cela intensifie le ressenti de l'instant présent et augmente la conscience corporelle.





## Fabrication au Danemark

Tous les produits AKVA sont fabriqués dans notre propre usine au Danemark. L'usine qui fonctionne avec l'électricité des éoliennes, abrite un grand nombre de compétences, qui contribuent ensemble à l'artisanat danois de la plus haute qualité. Depuis plus de 40 ans, notre usine fabrique des produits durables et respectueux de l'environnement.

Depuis 2001, nous utilisons uniquement du vinyle en PVC sans phtalates pour nos matelas à eau et nos housses de sécurité. Les adoucisseurs utilisés dans la production scandinave du vinyle premium stratifié contiennent 100% de Mesamoll® de la société allemande Lanxess.

Comme nos textiles, notre vinyle de matelas est certifié et testé pour des substances nocives conformément à la classe de produits Oeko-tex-standard 100 et convient ainsi au contact direct même avec des enfants.

**X Mesamoll®**


**LANXESS**  
Energizing Chemistry

**TEXTILES  
VERTRAUEN**  
Geprüft auf Schadstoffe  
nach Oeko-Tex® Standard 100

Nous travaillons avec détermination pour promouvoir un avenir plus durable. C'est pourquoi, nous croyons en la valeur de l'entretien, à l'opposé de la production inutile et agissons conformément à cette philosophie.

Un lit Akva peut être entretenu et sa vie prolongé par des produits d'entretien et / ou des pièces de rechange fabriquées dans notre propre usine à Ry, au Danemark.

care & repair

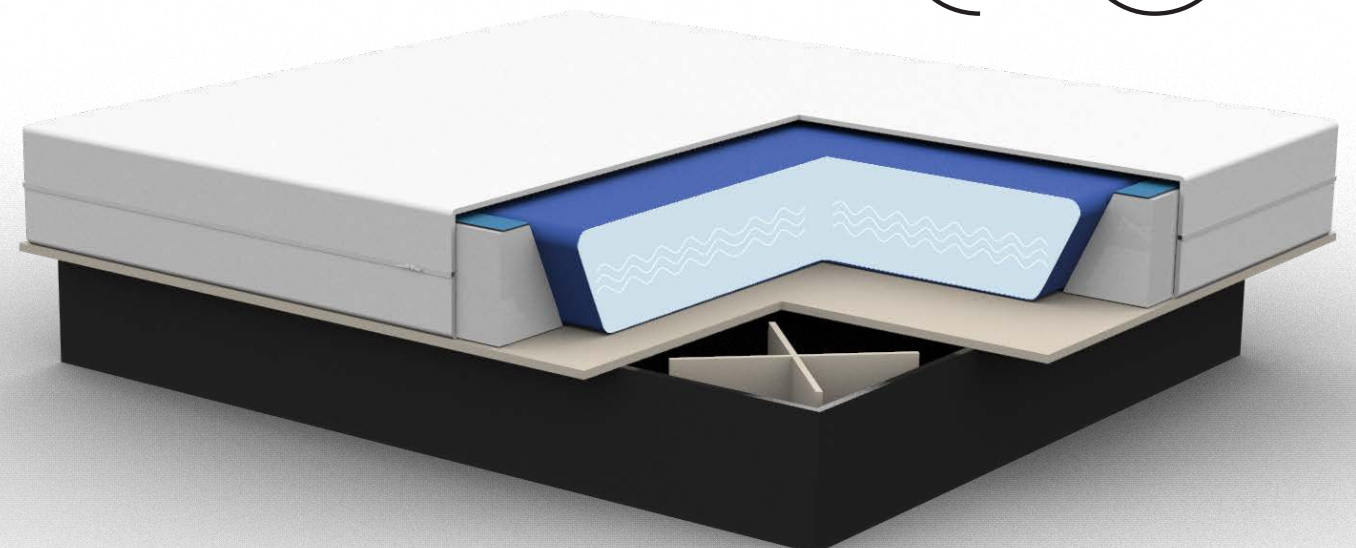




## Akva Sound®

L'eau conduit le son 25 fois plus efficacement que l'air, c'est pourquoi les baleines peuvent communiquer sur des distances de plus de 50 km. Dans les lits à eau Akva Sound®, des transducteurs sonores spéciaux, situés dans l'embase sous le matelas à eau, transmettent au corps les basses fréquences de la source sonore sous forme de vibrations.

Des vibrations tangibles et palpables s'unissent aux sons audibles pour une expérience intense. Que ce soit pour une relaxation ou une thérapie ciblée, l'intensité de la transmission sonore et le spectre de fréquences du lit à eau peuvent être réglés indépendamment de la source sonore et des haut-parleurs de l'espace grâce à une unité de commande facile à utiliser.

Les transducteurs sonores sont montés de manière flexible dans l'embase avec un support en caoutchouc, ce qui leur permet de transmettre les vibrations directement à l'eau.

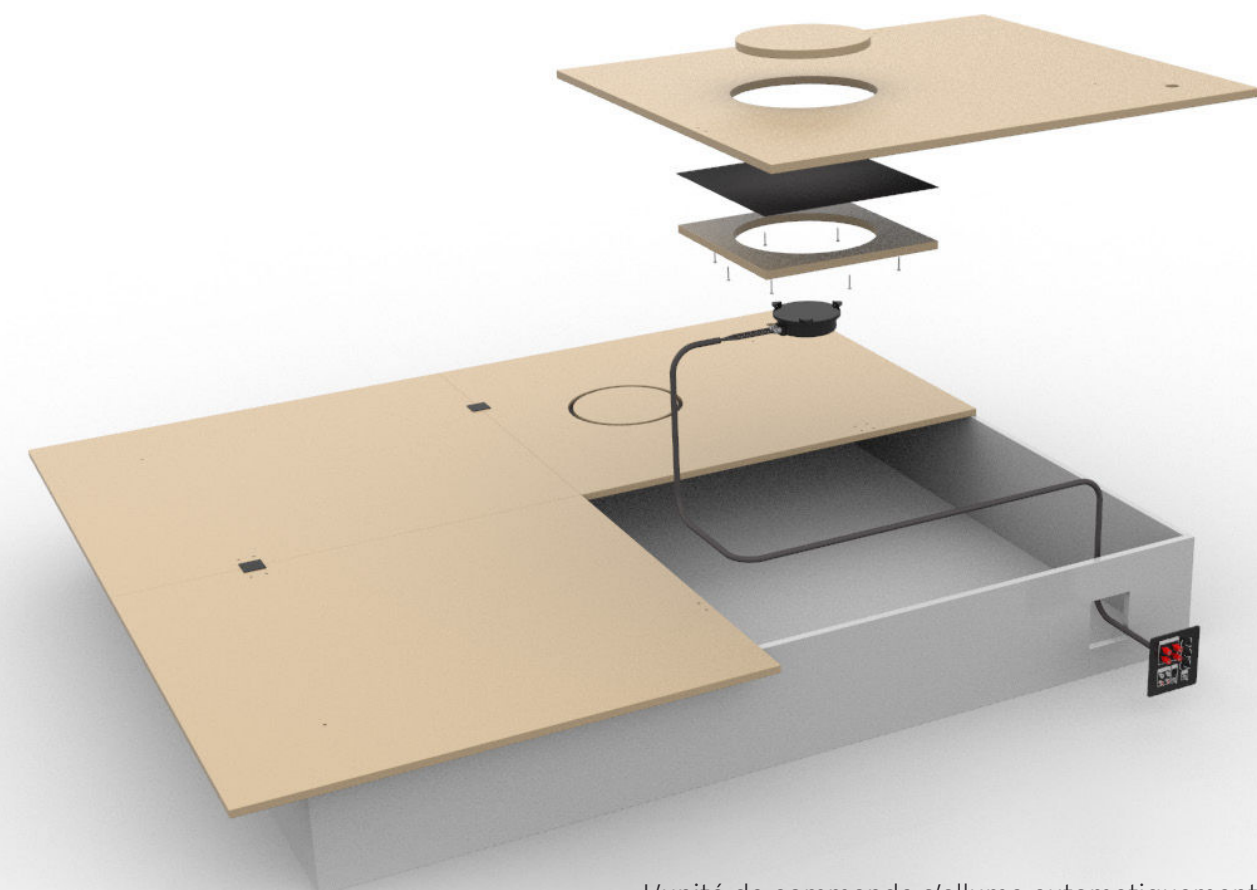

L'unité de commande s'allume automatiquement chaque fois qu'un signal audio est enregistré. La puissance du son et des vibrations sont réglables. Le panneau de commande est installé discrètement dans la base en bois, mais il peut également être installé à l'extérieur du lit à eau.

## Accessoires

### Massage par vibrations

Ajoutez un système de massage à votre expérience sensorielle. Choisissez entre un système intégré ou un tapis de massage séparé.

L'intensité, l'emplacement et le type de massage (par exemple pulsant ou ondulé) peuvent être convenablement définis à l'aide de la télécommande.

#### Massage intégré

Les unités de massage sont montées sur les plaques de support sous le matelas à eau.

#### Le tapis de massage

Un matelas distinct qui peut être utilisé sur votre lit à eau ou sur d'autres surfaces planes.



### Récepteur Bluetooth pour l'unité de contrôle

Des smartphones, tablettes ou autres appareils avec une transmission Bluetooth-peuvent se connecter à l'unité de contrôle d' Akva Sound® et transmettre de la musique sans fil.











# Socles


Les socles de hauteurs 25, 30, 34 et 37,5 cm peuvent être équipés de systèmes de tiroirs sur roulettes ou sur rails.

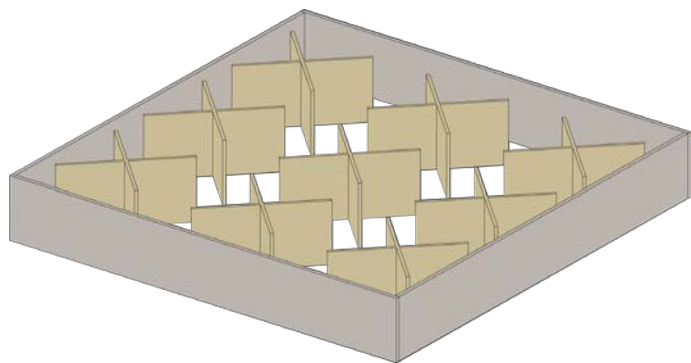


Box socle

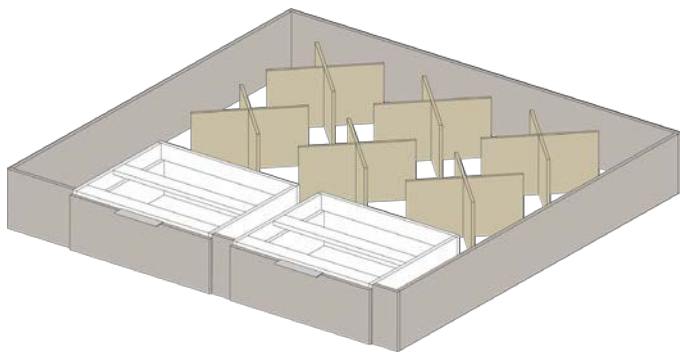


2 Box socle

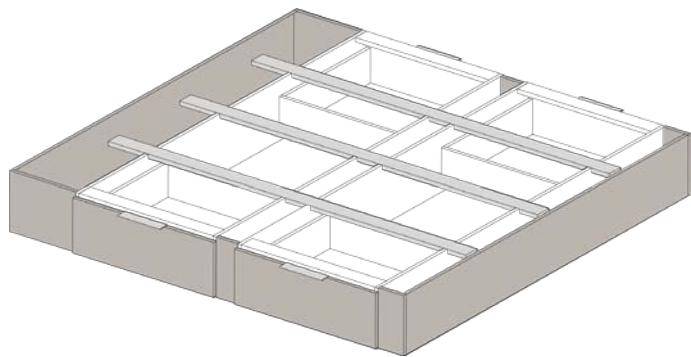

4 Box socle

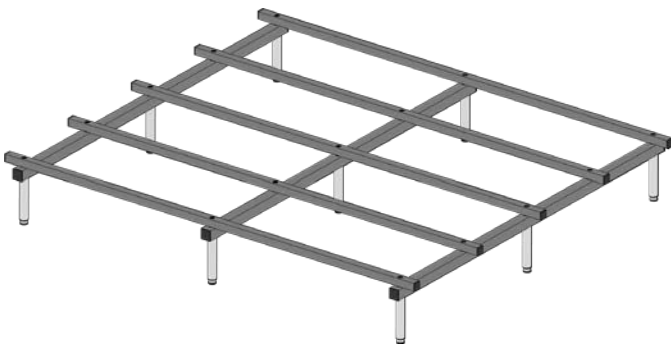

Benti socle

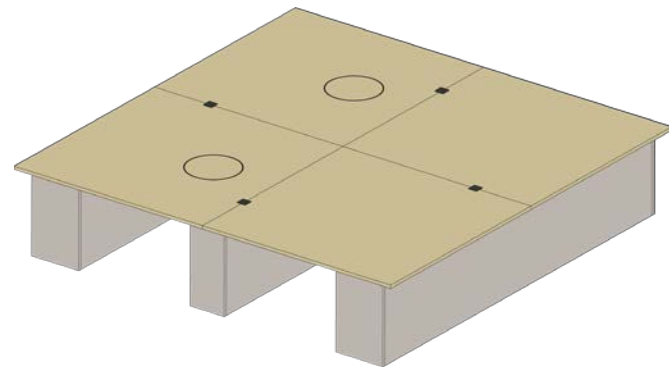

Lift socle

# Solutions de stockage



Tables d'appoint avec tiroirs pour le rangement des appareils techniques, des jouets ou du matériel de thérapie



Bancs de rangement avec assise



Poufs rembourrés



Solutions de rangement  
Des commodes assorties aux surfaces des socles sont disponibles dans les largeurs 50 cm, 100 cm ou sur mesure.






## Choix du matériel

Akva Sense® peut être fabriqué sur mesure. Choisissez parmi une variété de surfaces, y compris la mélamine, le placage ou le textile.

Vous pouvez retrouver notre sélection de matériaux sur [www.akvacare.com](http://www.akvacare.com)

## Housse amovible en polyuréthane


Ces housses lavables peuvent être lavées jusqu'à 90°C et se composent d'une housse supérieure et inférieure avec une fermeture éclair au milieu des côtés. Différentes couleurs peuvent être combinées. Certifié OekoTex Standard 100 et ignifuge pour une utilisation dans les espaces publics ainsi que dans les environnements de soins personnels, thérapeutiques et hospitaliers.

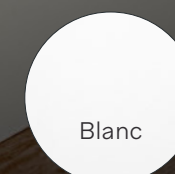


Blanc



Beige

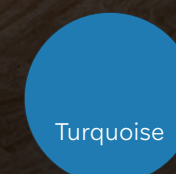

Turquoise

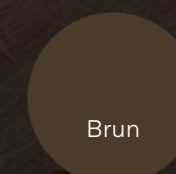

Brun





Revendeur agréé AkvaCare :

**SARL DOS LIT**  
**331 Route de Vannes**  
**44 800 SAINT-HERBLAIN**  
**02 40 94 80 94 - 06 80 30 46 19**  
**[doslit@orange.fr](mailto:doslit@orange.fr)**

AKVA Waterbeds A/S  
Boeletvej 25  
DK-8680 Ry  
Tel +45 8689 3400  
[www.akvacare.com](http://www.akvacare.com)